

インデックスフィルタホイールマウント

Indexed Filter Wheel Mounts



FWM1x12

FWM1x6

リテーニングリングは標準装備、フィルタは別売です。

Newportのフィルタホイールマウントは、コンパクトな構造でありながら6~12枚のNDフィルタまたは任意の1インチ（25.4ミリ）光学部品を確実に保持します。フィルタホイールは3個のスプリングで荷重を掛けたインデックスボール機構により支持されガタつきのない自由回転を行います。6箇所のフィルタ用開口で光が全く遮られずに透過するように基礎マウントが設計されており、これらの開口の光軸高は1、2、3インチ（25.4、50.8及び76.2ミリ）のいずれかになります。

シングル/デュアルフィルタホイール：推奨セットアップ

光学密度の値


| | | | | | | |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1段目のホイール | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 2段目のホイール | 0.03 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |

光学密度は足し算で計算できます。それ故、2つのフィルタホイールを使用したり、あるいは1つのスロットに2枚のフィルタを挿入したりすることによって、広い範囲の光学密度をカバーすることができます。例えば、光学密度がそれぞれ1.5と0.2のフィルタを選択して組み合わせることにより光学密度1.7を実現することができます。

発注のご案内

| モデル | 仕様 | Price |
|---------|-------------------------------------------------|---------|
| FWM1X6 | シングルホイールフィルタマウント [6個の1インチ（25.4ミリ） オプティクスをマウント] | ¥29,100 |
| FWM1X12 | デュアルホイールフィルタマウント [12個の1インチ（25.4ミリ） オプティクスをマウント] | ¥42,300 |
| FWM | フィルタマウントのみ（フィルタホイールを含みません） | ¥16,000 |
| FWM1X6 | フィルタホイールのみ [6個の1インチ（25.4ミリ） オプティクスをマウント] | ¥14,600 |

Model FWM

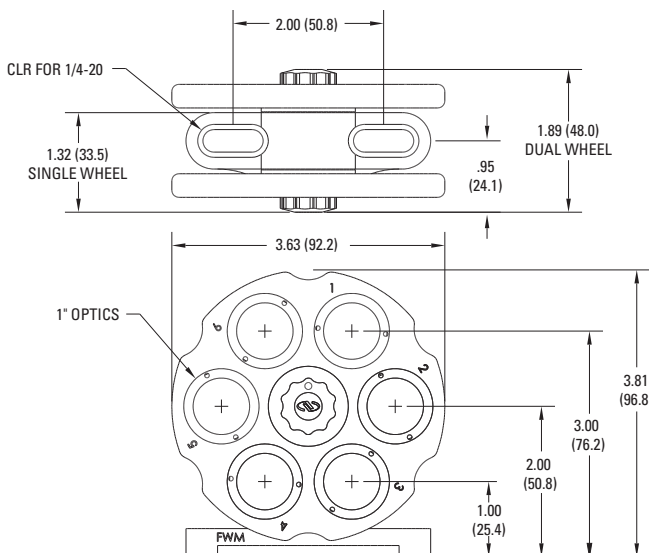

CAD CADファイルについては、
弊社までお問合せください。

- インデックス付きの正確な回転
- 全てのフィルタスロットを光が遮蔽されずに透過
- フィルタホイールの取外しが簡単
- 簡単に交換できるフィルタホルダ
- ポストまたはテーブルにマウント
- インチ/ミリ仕様の両方に対応
- ベースも入替え可能

減光フィルタ

| | |
|----|------------|
| 寸法 | 25-25.4 mm |
| 厚さ | 3 mm max. |

関連製品



UVフューズドシリカ金属NDフィルタ (P664参照)



モデル5214および5215フィルタホイールにはNDフィルタ一式が付属しています。



電動フィルタホイール (P532参照)

ミラーマウント

レンズホルダ

専用光学マウント

ルーラシステム

メカニカルシャッタ

アクセサリ

ベース&ブラケット

ポスト&ロッドシステム

コンポーネントセット

フィルタマウント