

## RLシリーズ LabLegs™ RL非除振固定支持脚 Non-Isolating Rigid Legs



- 高負荷用非除振脚
- 低周波振動を除去出来る設計構造
- 高い水平安定性
- タイバー・キャスターシステム追加可能

RLシリーズの非除振LabLegs™支持脚は、除振を必要としない用途のための固定支持を行います。交差部材構造のサポートシステムとは違い、自立型の設計のため低周波数の床振動を増幅しません。高さを調整できるRLシリーズは、テーブル外のターゲットにビームを当てるような用途には最適です。

### 仕様

モデル	垂直共振 (Hz)	水平共振 (Hz)	除振脚1本の負荷 (kg)
RL-2000 Series	55	45	2000 (900)


### 発注のご案内

RL-2000-NH  
 1セットの除振脚数  $\uparrow$   $\uparrow$  除振脚の高さ (インチ)

例えばRL-2000-428は、28インチ除振脚4台のシステムを指定します。4×8フィートのテーブルにタイバー・キャスターシステムを追加したい場合は、モデル番号の後にTCを付けて、下記のようにタイバーやキャスタを注文して下さい。

- 1) RL-2000-428TC
- 2) M-TBC-48

### RL Series

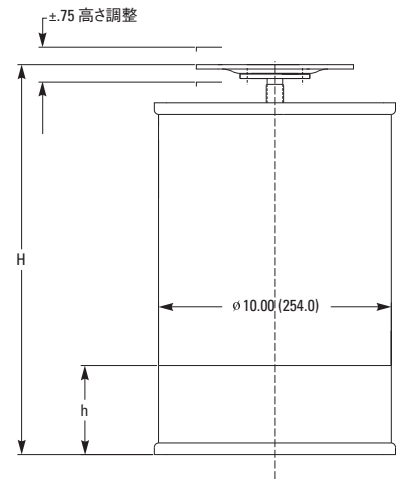

モデル	寸法 [in. (mm)]	
	H	h
RL-2000-N10	10.0 (254)	N/A
RL-2000-N13.5	13.5 (343)	1.7 (43.2)
RL-2000-N16	16.0 (406)	3.8 (96.5)
RL-2000-N19.5	19.5 (495)	7.3 (185.4)
RL-2000-N22	22.0 (559)	9.8 (248.9)
RL-2000-N23.5	23.5 (597)	11.3 (287.0)
RL-2000-N28	28.0 (711)	15.8 (401.3)

他の寸法もご要望に応じます。