


IRセンサカード


IR Sensor Card

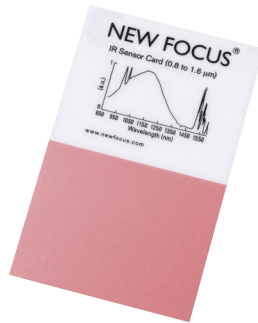

- 端部まで照射面
- リン光体を事前に塗布する必要無し
- PVC ISOカード材料は、切断時に薄層が裂けたり、劣化することが無い

このIRセンサカードは、IRビューワに替わる低コスト製品です。このカードを使えば、お客様個々の光学系において近赤外線とIRビームの位置を容易に特定できます。このカードはまた標準的な名刺サイズで、携帯に便利です。カードの照射面はリン材料で作られており、赤外線照射を受けると可視光を放出します。他社のカードのようにリン光体保護のために分厚いラミネートを使用することはありません。このカードではリン光体がカード材料に塗りこまれており、薄層に裂けたり、リン光体が劣化することなく、カードを切断することができます。このカードは透過性と反射性の両方の表面を備えているため、2枚のカードを購入する必要もありません。カードはリン光体を端部まで塗布しているため、ビームのチェックが容易にできます。

モデル5842 応答曲線

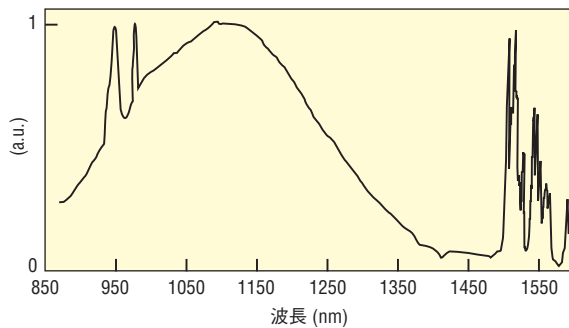

モデル	内容	寸法	検出部サイズ
5842	IR センサカード、800-1600 nm、1.7 x 2.1 in. センサ	3.4 in. x 2.1 (85.5 x 54)	1.7 in. x 2.1 in (42.75 x 54)

発注のご案内

モデル	内容	Price
5842	IRセンサカード、800-1600 nm、1.7 x 2.1 in. センサ	¥14,000