


## クオーツタングステンハロゲンランプ用ロッドマウント

## Rod Mounts for Quartz Tungsten Halogen Lamps

**Oriel**  
INSTRUMENTS  
A Newport Corporation Brand

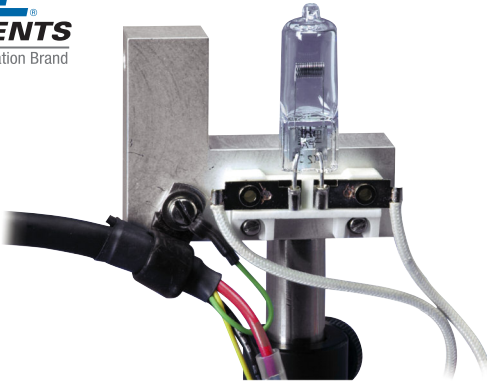

6334ランプをマウントした66306ロッドマウント

- ランプハウジングの代用品として低価格
- 250 Wまでのランプに対応
- ランプを垂直または水平に保持
- ランプを素早く簡単に取付けおよび取外し

低出力クオーツタングステンハロゲンランプ用のシンプルで低コストな露出型ホルダです。試料の近くに光源を配置したい場合に特に便利です。各マウントの2面（垂直方向、水平方向）に1/4-20タップ穴が設けられていますので、ランプを垂直と水平のどちら向きにしてもロッドにマウントすることができます。

## 出射光を平行化

ランプハウジングとは違い、このランプマウントには集光レンズが付いていませんが、平凸レンズを使えば簡単に射出光を平行にすることができます。図1に描かれた平凸レンズは、収差を最低近くまで抑えた短レンズです。射出光を再度集束させるには、平凸レンズをもう1つ使用します。フィラメントの大きなランプに関しては、理想的な平行光にはできません。

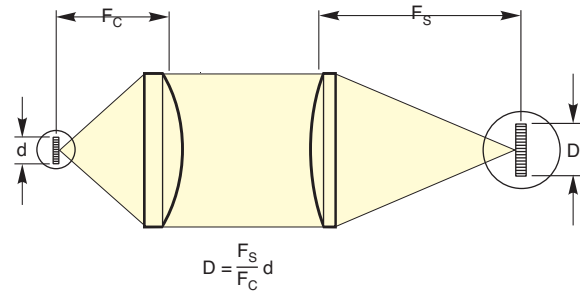


図1. ランプからの射出光を2つのレンズで平行化およびフォーカス

## 発注のご案内

モデル	ランプタイプ	Price	こちらのランプマウントをご使用ください	Price
6318	10W クオーツタングステンハロゲン	¥2,500	66305	¥16,500
6319	20W クオーツタングステンハロゲン	¥3,300		
6332	50W クオーツタングステンハロゲン、短フィラメント	¥4,100		
6337	50W クオーツタングステンハロゲン、長フィラメント	¥4,100	66306	¥18,100
6333	100W クオーツタングステンハロゲン	¥4,400		
6334NS	250W クオーツタングステンハロゲン	¥4,900		

WEB 詳細は当社のWebサ  
参照してください。