

ユニバーサルケーブルクランプ

Universal Cable Clamp




モデルF-CCケーブルクランプは、ファイバケーブルを確実に保持し、歪みを解除する便利な汎用商品です。ファイバは、2つのV字型溝のいずれかの所定の位置にクランプできます。2本のクランプバーによってSPシリーズ・サポートポスト（P859参照）を使いご希望の高さに取り付けることができます。クランプバーは、ツマミネジで所定の位置にロックします。

テーブルに直接取り付ける場合は、ポジションナとポストホルダ、ネジ山の付いたスタブポストも必要となります。スタブポストは、クランプがポストに取り付けられている場合に、外側のV字型溝内にケーブルを保持するためにも使用できます。

このクランプは、V字型配列により、光ケーブルおよび電気ケーブルと同様に小型の円筒形光学部品を実験用に保持するためにも役立つものとなっています。

発注のご案内


モデル	内容	Price
F-CC	ユニバーサルケーブルクランプ、2つのV字型溝	¥14,500

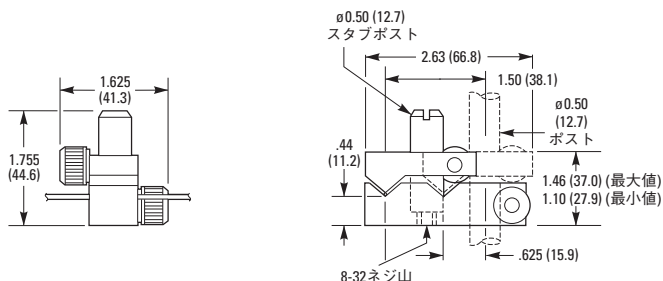

Orielファイババンドル用カプラ

Coupler for Oriel Fiber Bundles

ORIEL
INSTRUMENTS
A Newport Corporation Brand

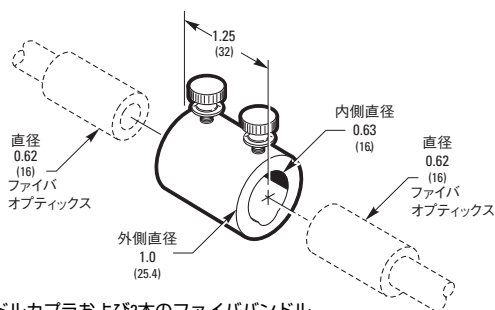

77807ファイババンドルカプラおよび2本のファイババンドル

- 2つのOrielファイババンドルを結合して一体化
- シンプルで低価格

77807は、2本のOrielファイババンドルを結合します。このサムスクリュ付シリンダの内側直径は11 mmです。反射損失およびバンドルのアライメントミスが原因となって伝達エネルギーがいくらか失われます。アライメントミスによる損失が懸念されますので、この製品を直径2 mm (0.081インチ) 未満のバンドルに使用することはお勧めしておりません。

発注のご案内

モデル	内容	Price
77807	ファイババンドルコネクタ、サムスクリュ、内側直径11 mm	¥6,300

WEB 詳細は当社のWebサイトを参照してください。