

# 488シリーズ 高さ調整可能な回転ステージ Height-Adjustable Rotary Stage



488 (M-488)

- すべての高さで安定
- 垂直モーショント回転モーショント別々にロック可能
- マウント用の汎用タップ穴のついたプラットフォーム

大きなプラットフォームを備えた488シリーズの高分解能垂直ラポジャッキは、モーショントのロックが可能で、バックラッシュのない斬新な設計です。どんな高さにもしっかりとマウントでき、揺動を生じません。

「指にやさしい」シェル型調整リングにより、回転を伴わない垂直方向の移動を可能にしました。0.01 mm単位で最大1 in (25.4 mm) の移動が可能です。へこみの付いたロックスクリューはマウントに必要な高さにしっかりと固定します。ロック可能な回転プラットフォームの粗調用のリムは、2°刻みの目盛つきです。488シリーズには、プリズムやキューブなどの高さが最大2 in (50.8 mm) の光学部品を確実に取り付けるためのクランプが2つ付属しています。

## 仕様

最大移動量 [in. (mm)]	1.0 (25.4)
最小高 [in. (mm)]	2.0 (50.8)
垂直方向の目盛 [in. (mm)]	0.0004 (0.01)
回転量の目盛	2°
調節可能な耐荷重 [lb (N)]	10 (44.5)
静止耐荷重 [lb (N)]	150 (667)


## 発注のご案内

モデル (ミリ仕様)	内容	Price
488 (M-488)	488高さ調整可能な回転ステージ、1 in.移動量	¥56,800

モデル (ミリ仕様)	ネジ 寸法 [in. (mm)]					
	A	B	C	D	E	F
488 (M-488)	8-32 (M4)	1/4-20 (M6)	1.000 (25.0)	2.00 (50.0)	0.937 (24.0)	1.56 (40.1)

CAD CADファイルについては、  
弊社までお問合せください。

## 関連製品

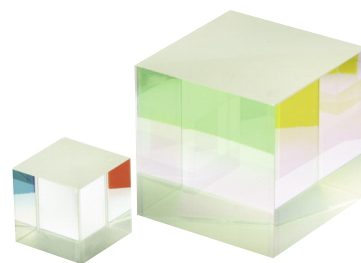

広帯域偏光ビームスプリッタキューブ

## Model 488

