

# アジャスト式シリンドリカルレンズマウント

## Adjustable Cylindrical Lens Mount



(アダプタ、ポスト、レンズは別売です)

- シリンドリカルレンズがセンターを中心にして回転
- 回転範囲±5°
- 感度6秒
- 各種サイズのシリンドリカルレンズに対応するアダプタ

CYM-2Rは、高さ2インチまでのシリンドリカルレンズを固定してポジショニングするためのレンズマウントです。このマウントの特徴は、レンズの中央部を中心に回転させられることです。この機能により、パワー軸回転の途中で起こる並進動作をなくすることができます。100TPIスクリューを操作することで、±5°の範囲を6秒の感度で回転調節することができます。さらにアダプタ（別売）を使用すれば、サイズの異なるシリンドリカル光学系であっても中央部を中心として回転調節が可能です。高さ1/4インチ、1/2インチ、1インチ、および19ミリのシリンドリカルレンズをマウントできる各種アダプタが用意されています。これらのアダプタを使用すると、シリンドリカルレンズの中央部が自動的にCYM-2Rの回転中心に一致し、取り付けを迅速にする位置決めピンが設けられています。


### 仕様

| モデル    | 光学系の最大高さ (mm) | 調節スクリューのネジ | 角度範囲 | 感度        |
|--------|---------------|------------|------|-----------|
| CYM-2R | 50.8          | 100 TPI    | ±5   | 6 arc sec |


### CYM-2R用レンズアダプタ発注のご案内

| モデル                   | 仕様                         | Price   |
|-----------------------|----------------------------|---------|
| CYM-2R                | シリンドリカルレンズマウント             | ¥18,600 |
| <b>CYM-2R用レンズアダプタ</b> |                            |         |
| CYM-2R-A6.35          | シリンドリカルレンズアダプタ、6.35 mm レンズ | ¥4,900  |
| CYM-2R-A12.7          | シリンドリカルレンズアダプタ、12.7 mm レンズ | ¥4,800  |
| CYM-2R-A19.0          | シリンドリカルレンズアダプタ、9.0 mm レンズ  | ¥5,300  |
| CYM-2R-A25.4          | シリンドリカルレンズアダプタ、25.4 mm レンズ | ¥4,800  |

### Model CYM-2R

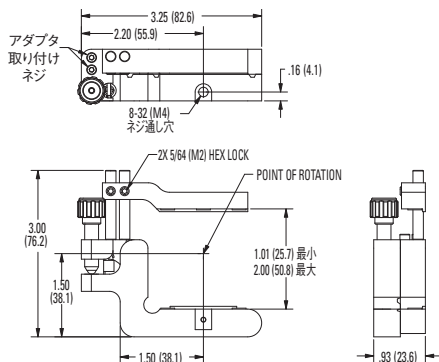

### CYM-2Rアダプタ

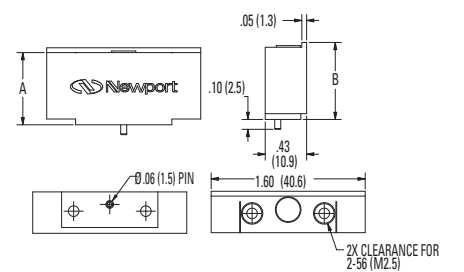

| モデル          | A           | B           |
|--------------|-------------|-------------|
| CYM-2R-A6.35 | 0.88 (22.4) | 0.93 (23.6) |
| CYM-2R-A12.7 | 0.75 (19.1) | 0.80 (20.3) |
| CYM-2R-A19.0 | 0.63 (16)   | 0.68 (17.3) |
| CYM-2R-A25.4 | 0.50 (12.7) | 0.55 (14)   |

### 関連製品



ポストマウント  
オプション  
(P976参照)



BK 7精密シリン  
ドリカルレン  
ズ  
(P783参照)



VALUMAX® BK 7  
シリンドリカル  
レンズ



UVフューズド  
シリカ精密シリン  
ドリカルレン  
ズ  
(P785参照)

ミラーマウント  
レンズホルダ  
専用光学マウント  
ルーラシステム  
メカニカルシャッタ  
フセサリ  
ネース&フライング  
ボスト&  
ロッドシステム  
コンポーネン  
ツマウント