

ミラーマウント

レンズホルダ

専用光学マウント

レールシステム

メカニカルシヤッタ

アクセサリ

ベース&ブラケツト

ポスト&ロツクシステム


コンポーネントセツト

フィルタマウント

発注のご案内

モデル	タイプ	レール長 [in. (mm)]	幅 [in. (mm)]	ネジ穴タイプ	Price
9032	レール	1.55 (39.4)	0.75 (19.1)	1-4-20 (M6) Cザグリ穴	¥3,700
9022NF	レール	2.5 (63.5)	0.75 (19.1)	1-4-20 (M6) Cザグリ穴	¥3,800
9023NF	レール	6.0 (152.4)	0.75 (19.1)	1-4-20 (M6) Cザグリ穴	¥5,700
9020NF	レール	12.0 (304.8)	0.75 (19.1)	1-4-20 (M6) Cザグリ穴	¥10,100
9025NF (9025-M)	ポストキャリア	0.75 (19.05)	2.5 (63.5)	8-32, 1/4-20通し穴 (M4, M6通し穴)	¥3,200
9035 (9035-M)	ポストキャリア	0.75 (19.05)	1.55 (39.4)	1/4-20 (M6) 通し穴	¥3,800
9026 (9026-M)	ライザキャリア	2.5 (63.5)	2.5 (63.5)	8-32, 1/4-20 (M4, M6)	¥7,700
9027 (9027-M)	ライザキャリア	2.5 (63.5)	2.5 (63.5)	8-32, 1/4-20 (M4, M6)	¥9,300
9036 (9036-M)	ライザキャリア	1.55 (39.4)	1.55 (39.4)	8-32, 1/4-20 (M4, M6)	¥6,900
9029 (9029-M)	90° キャリア	2.5 (63.5)	2.5 (63.5)	8-32, 1/4-20 (M4, M6)	¥12,000
9039 (9039-M)	90° キャリア	1.55 (39.4)	1.55 (39.4)	8-32, 1/4-20 (M4, M6)	¥12,000
9021NF (9021-M)	ベースプレート	3.5 (88.9)	2.5 (63.5)	8-32, 1/4-20 (M4, M6)	¥7,700
9038 (9038-M)	モジュラスベースプレート	1.55 (39.4)	1.55 (39.4)	8-32, 1/4-20 (M4, M6)	¥5,300

精密光学レールとキャリア Precision Optical Rails and Carriers

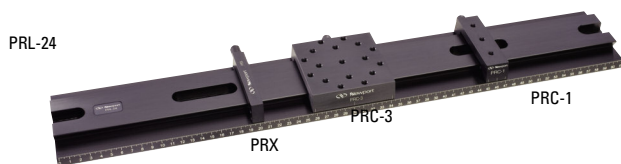

- 使い易いアリ機構設計
- テーブルのスペースを有効活用
- インチ/ミリ仕様どちらの光学テーブルでも任意の方位に設置可能
- インチ/ミリ両方でスケール表記

PRLシリーズ精密レールとPRCシリーズキャリアは作業の簡単なアリ機構で設計されています。レール/キャリアシステムは最小のテーブルスペースを最大限に有効利用できるように設計されています。レールの取付けスロットはインチ/ミリ仕様テーブルどちらの穴パターンにも適合します。精密機械加工したアルミニウムの表面をアルマイト処理して作られたレールは直線性に優れ、キャリアは滑らかに移動します。

レールにはインチとミリメートルの両方で読み取り可能な目盛が刻まれています。キャリアもまた作業が容易でレール上のどの位置にでも簡単に着脱できます。アルミニウムキャリアには超硬質ポリマーパッドが付いており、レールにマウントされるキャリア全体の高さの公称値は1.256インチ (31.9 mm) です。簡単に指で調整できるロックノブにより、キャリアをレール上のどの位置にでもしっかりとクランプすることができます。



モデル	寸法 [in. (mm)]	
	A	B
PRL-24	24.28 (616.7)	4.14 (105.2)
PRL-36	36.48 (926.6)	7.24 (183.9)

発注のご案内

ミリ仕様モデル	内容	レール長 [in. (mm)]	Price
PRL-6	レール	6.6 (167)	¥18,600
PRL-12	レール	12.5 (317)	¥26,600
PRL-24	レール	24.3 (617)	¥39,900
PRL-36	レール	36.5 (927)	¥47,900
PRC-1 (M-PRC-1)	キャリア	1.0 (25.4)	¥8,900
PRC-3 (M-PRC-3)	キャリア	3.5 (88.9)	¥11,800
PRX	位置決めブロック	0.5 (12.7)	¥6,400


レールはインチ/ミリ仕様どちらのテーブルにもマウントできます

レール仕様


平面度標準値 [in. (μm)]	0.002 (13)以上 1 ft (30 cm)
真直度標準値 [in. (μm)]	0.001 (25)以上 8インチ (20cm)




Model PRL-12

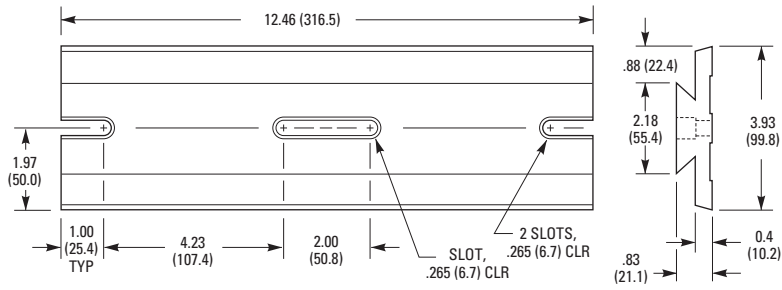


Model PRL-6

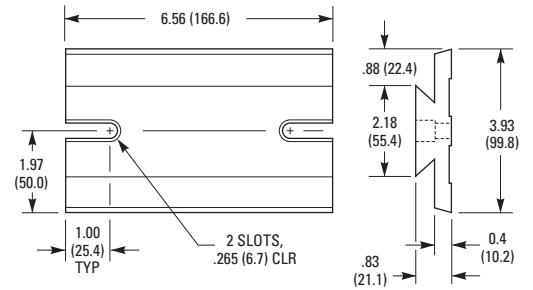


Model PRL-24, PRL-36

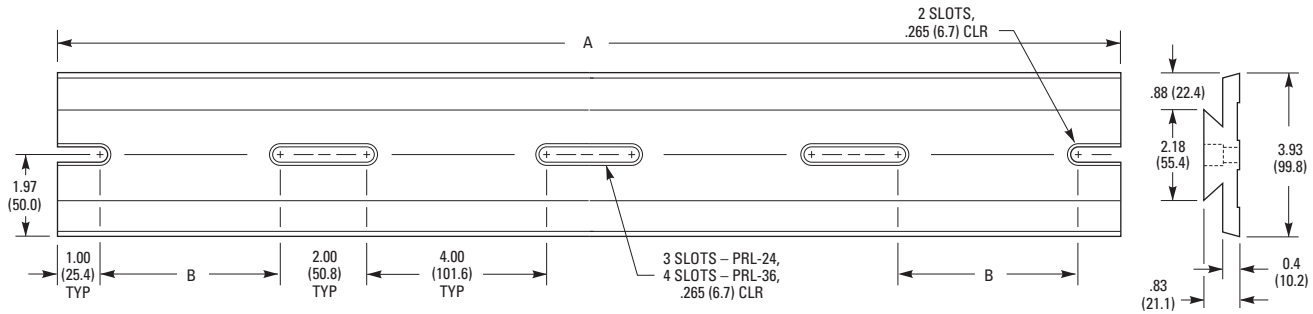


Model PRC-3

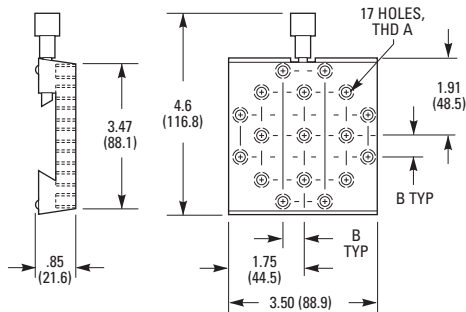

Model PRX

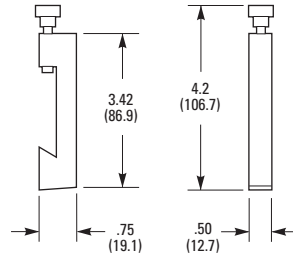

Model PRC-1

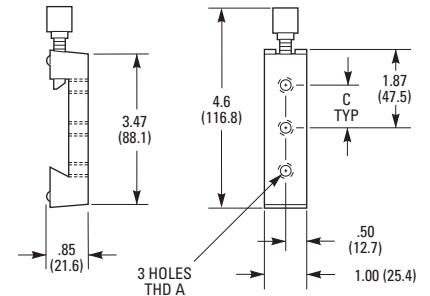

モデル (ミリ仕様)	ネジ規格		寸法 [in. (mm)]	
	A	B	C	
PRC-1 (M-PRC-1)	1/4-20 (M6)		1.000 (25.0)	
PRC-3 (M-PRC-3)	1/4-20 (M6)	0.500 (12.5)		

CAD CADファイルについては、
弊社までお問合せください。