

新製品紹介

mks | Newport™

薄型レプリカ中空金属レトロリフレクター

March.2020

薄型レプリカ中空金属レトロリフレクターの販売開始。


既存製品より大幅に厚みを押さえた薄型のレプリカ中空金属レトロリフレクターは、単一の固体アルミニウム片から製造されているため、振動の影響を受けない戻りビーム精度が得られます。

ミラーコーティングは、可視領域に最適な Al-MgF₂:アルミミラーと赤外反射率を得る為の金コーティングが選択可能です。

リフレクター径(0.5、1.0 インチ径)とコーティング(金、アルミ)、更にはビーム反射位置精度(2、5、10Arc-sec)に抛り6種のモデルの選択が可能です。

厚み寸法

薄型レトロリフレクター	既存レトロリフレクター
12.8mm (リフレクター径 0.5 インチ品)	21.69mm (リフレクター径 0.5 インチ品)
21.69mm(リフレクター径 1.0 インチ品)	30.66mm(リフレクター径 1.0 インチ品)

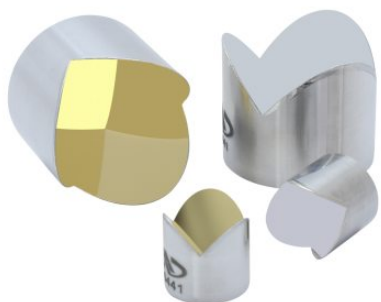

薄型レトロリフレクター製品群



既存レトロリフレクター製品群

<https://www.newport.com/f/low-profile-retroreflectors>

*詳細は Newport_gr@japanlaser.co.jp までお問い合わせ下さい。



レトロリフレクターを用いたショートパルス用ディレイラインステージ Kit



株式会社 日本レーザー

東京本社 TEL 03-5285-0853 大阪支店 TEL 06-6323-7286 名古屋支店 TEL 052-205-9711

E-mail: newport@japanlaser.jp / <http://www.newport-japan.jp>