

ミラーマウント

レンズホルダ

専用光学マウント

レーザシステム

メカニカルシャッタ

アクセサリ

ベース&ブラケット


ポスト&ロッド  
システム

コンポーネント  
セット


フィルターマウント

実験キット  
アプリケーション  
キット


VPT Series

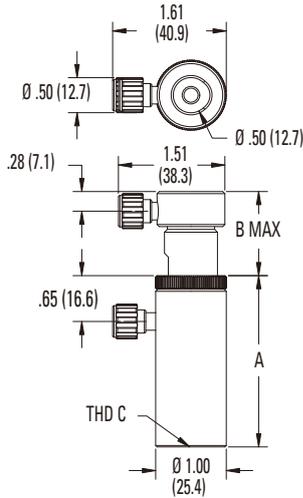


Model C-0.3

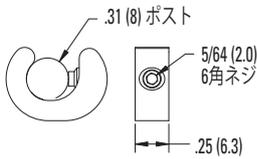

Model C-0.5

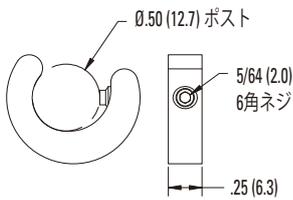

Models PS-A, PS-AZ

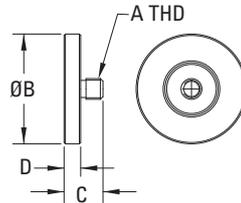

ミリ仕様モデル	日本仕様モデル	寸法 [in. (mm)]	直径 [in. (mm)]	ネジの タイプ
		A	B	C
M-VPT-2		1.44 (36.6)	0.84 (21.3)	1/4-20 (M6)
M-VPT-3		2.44 (62.0)	1.20 (30.5)	1/4-20 (M6)
M-VPT-4		3.44 (87.4)	1.20 (30.5)	1/4-20 (M6)

ミリ仕様 モデル	ネジの タイプ	寸法 [in. (mm)]	直径 [in. (mm)]	D
		A	B	C
M-PS-A	1/4-20 (M6)	1.25 (31.8)	0.44 (11.2)	0.19 (4.8)
M-PS-AZ	1/4-20 (M6)	1.25 (31.8)	0.44 (11.2)	0.19 (4.8)

CAD CADファイルについては、  
弊社までお問合せください。

ペDESTALポストホルダ  
Pedestal-Base Post Holders



(左から右へ)PS-F, VPH-2-P, VPT-4-P, PS-A, MPH-3-P

- 光学テーブルに固定可能なペDESTALベース
- 標準、直進、小型
- 片手で操作可能なバネ付きポストホルダ

ペDESTALポストホルダは、Newportの主力であるVPH、MPH、およびVPTシリーズのポストホルダすべての機能に加え、ペDESTALベースのメリットも兼ね備えています。PS-Fスロット付きクランプフォークを使用すると、部品を光学テーブルのどこにでも固定できるという柔軟性が得られます。また、これらのポストホルダは底が開いているため、ポストをテーブル面まで落とし、高さを揃えて取り付けられます。この機能は、軸高を維持することが重要な場合にとくに便利です。


PS-AシリーズのペDESTALアダプタを取付けると、標準のポストホルダをベース装備のペDESTALポストホルダとして使用できます。

## 発注のご案内

モデル(ミリ仕様)	ポスト直径[in. (mm)]	高さ[in. (mm)]
<b>標準ペDESTALベースポストホルダ</b>		
VPH-1-P	0.5 (12.7)	1.19 (30.2)
VPH-2-P	0.5 (12.7)	2.19 (55.6)
VPH-3-P	0.5 (12.7)	3.19 (81.0)
VPH-4-P	0.5 (12.7)	4.19 (106.4)
VPH-6-P	0.5 (12.7)	6.19 (157.2)
<b>直進ペDESTALベースポストホルダ</b>		
VPT-2-P	0.5 (12.7)	2.13-2.46 (54.1-62.5)
VPT-3-P	0.5 (12.7)	3.13-3.46 (79.5-87.9)
VPT-4-P	0.5 (12.7)	4.13-4.46 (104.9-113.3)
<b>ペDESTALベースアダプタおよびクランプフォーク</b>		
PS-A (M-PS-A)	ペDESTALアダプタ	
PS-AZ (M-PS-AZ)	磁気ペDESTALアダプタ	
PS-F	クランプフォーク	


\*ポストを水平および垂直に固定可能

## VPH-Pシリーズ

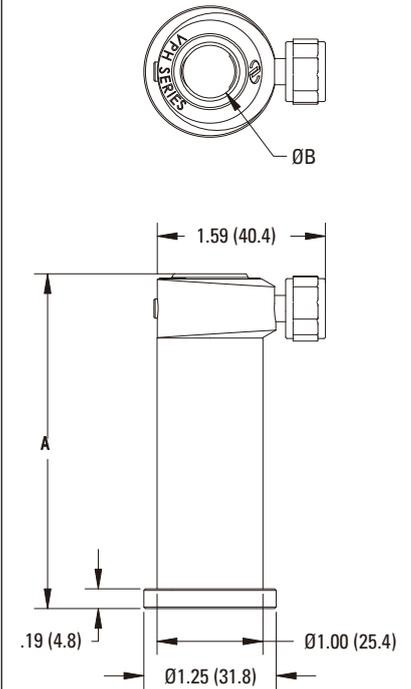


モデル	寸法 [in. (mm)]		直径 [in. (mm)]
	A	B	
VPH-1-P	1.19 (30.2)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)
VPH-2-P	2.19 (55.6)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)
VPH-3-P	3.19 (81.0)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)
VPH-4-P	4.19 (106.4)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)
VPH-6-P	6.19 (157.2)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)

## VPT-Pシリーズ

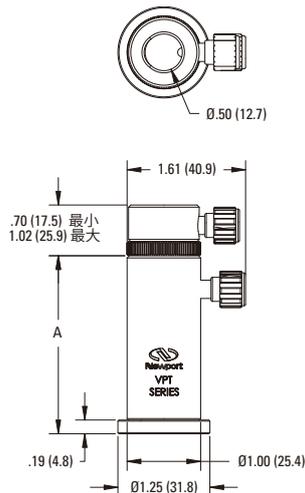

モデル	寸法 [in. (mm)]
VPT-2-P	1.44 (36.6)
VPT-3-P	2.44 (61.9)
VPT-4-P	3.44 (87.4)

## Model PS-A, PS-AZ

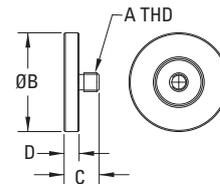

モデル(ミリ仕様)	ネジのタイプ	直径 [in. (mm)]		寸法 [in. (mm)]	
		A	B	C	D
PS-A (M-PS-A)	1/4-20 (M6)	1.25 (31.8)	0.44 (11.2)	0.19 (4.8)	
PS-AZ (M-PS-AZ)	1/4-20 (M6)	1.25 (31.8)	0.44 (11.2)	0.19 (4.8)	