

Agilis™ シリーズコントローラ

Agilis™ Series Controllers



- Agilis™ ピエゾ駆動製品と互換
- USBインターフェースを搭載した2チャンネルのハンドヘルド式 AG-UC2または8チャンネルのAG-UC8
- USB、RS232、RS485インターフェースを搭載した8チャンネルのAG-UC8PC
- ASCIIコマンド、Windows DLL、LabViewVIが付属
- オプションのUSB電源



Agilis™ピエゾ駆動コントローラは、2チャンネルと8チャンネルモデルを取り揃えています。2チャンネルのハンドヘルド式AG-UC2は、USBポートまたは独立型のUSB-CH電源からの電力で駆動できます。Agilis™ AG-UC8とAG-UC8PCコントローラはいずれも、最大8つの圧電モータを駆動できます。これらのコントローラはコンピュータからUSBポートを介して電力が直接供給されますが、AG-UC8PCモデルについては外部電源からも電力が供給されます。ソフトウェアユーティリティを使用すると、選択した2つのモータ（1と2、3と4など）を同時に駆動し、別のペアのモータに切り替えることができます。

あらゆる機能に対応する一連のASCIIコマンド、Windows DLL、LabViewVIが用意されています。

仕様

	AG-UC2	AG-UC8	AG-UC8PC
軸数	2	8	8
インターフェース	プッシュボタンとUSB	USB	USB、RS-232とRS-485
電力入力	USBインターフェース	USBインターフェース	USB：USB経由 RS-232とRS-485：HE10コネクタを経由して5Vを確保
寸法 (mm)	177×57×19	135×90×25	130×85

発注のご案内

モデル	内容
AG-UC2	小型ハンドヘルド式2軸ピエゾ駆動コントローラ
AG-UC8	小型8軸ピエゾ駆動コントローラ
AG-UC8PC	OEM用Agilis™ 8軸ピエゾコントローラ、USB/RS232/RS485
USB-CH1	USB電源、国別プラグ付 (米国、ヨーロッパ、英国、オーストラリア)、2mケーブル


¹ USB-CH1は、AG-UC2の使用時、電源をPCから供給できない場合のみ必要となります。



AG-UC2ハンドヘルド2軸コントローラ



AG-UC8小型8軸コントローラ

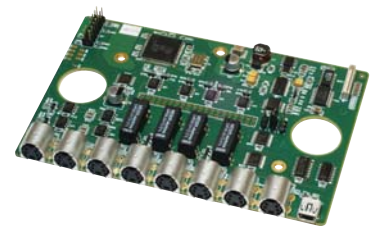

AG-UC8PC 8軸PCカードコントローラ