


発注のご案内

| モデル | タイプ | レール長 [in. (mm)] | 幅 [in. (mm)] | ネジ穴タイプ |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| 9032 | レール | 1.55 (39.4) | 0.75 (19.1) | 1-4-20 (M6) Cザグリ穴 |
| 9022NF | レール | 2.5 (63.5) | 0.75 (19.1) | 1-4-20 (M6) Cザグリ穴 |
| 9023NF | レール | 6.0 (152.4) | 0.75 (19.1) | 1-4-20 (M6) Cザグリ穴 |
| 9020NF | レール | 12.0 (304.8) | 0.75 (19.1) | 1-4-20 (M6) Cザグリ穴 |
| 9025NF (9025-M) | ポストキャリア | 0.75 (19.05) | 2.5 (63.5) | 8-32, 1/4-20通し穴 (M4, M6通し穴) |
| 9035 (9035-M) | ポストキャリア | 0.75 (19.05) | 1.55 (39.4) | 1/4-20 (M6) 通し穴 |
| 9026 (9026-M) | ライザキャリア | 2.5 (63.5) | 2.5 (63.5) | 8-32, 1/4-20 (M4, M6) |
| 9027 (9027-M) | ライザキャリア | 2.5 (63.5) | 2.5 (63.5) | 8-32, 1/4-20 (M4, M6) |
| 9036 (9036-M) | ライザキャリア | 1.55 (39.4) | 1.55 (39.4) | 8-32, 1/4-20 (M4, M6) |
| 9029 (9029-M) | 90° キャリア | 2.5 (63.5) | 2.5 (63.5) | 8-32, 1/4-20 (M4, M6) |
| 9039 (9039-M) | 90° キャリア | 1.55 (39.4) | 1.55 (39.4) | 8-32, 1/4-20 (M4, M6) |
| 9021NF (9021-M) | ベースプレート | 3.5 (88.9) | 2.5 (63.5) | 8-32, 1/4-20 (M4, M6) |
| 9038 (9038-M) | モジュラスベースプレート | 1.55 (39.4) | 1.55 (39.4) | 8-32, 1/4-20 (M4, M6) |

精密光学レール・キャリア

Precision 100 mm Dovetail Optical Rails

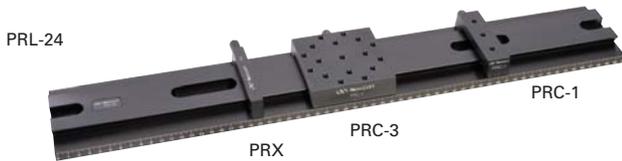

- 使い易いアリ機構設計
- テーブルのスペースを有効活用
- インチ/ミリ仕様
- インチ/ミリ両方でスケール表記

作業性の高いアリ機構で設計され、レール/キャリアシステムは最小のテーブルスペースを最大限に有効利用できます。レールの取付けスロットはインチ/ミリ仕様テーブルどちらの穴パターンにも適合し、精密機械加工したアルミニウムの表面をアルマイト処理して作られたレールは直線性に優れ、キャリアは滑らかに移動します。

レールにはインチとミリメートルで目盛が刻まれています。キャリアもまた作業が容易でレール上のどの位置にでも簡単に着脱できます。アルミニウムキャリアには超硬質ポリマーパッドが付いており、レールにマウントされるキャリア全体の高さの公称値は1.256インチ (31.9 mm) です。簡単に指で調整できるロックノブにより、キャリアをレール上のどの位置にでもしっかりとクランプすることができます。

発注のご案内

| ミリ仕様モデル | 内容 | レール長 [in. (mm)] |
|-----------------|----------|-----------------|
| PRL-6 | レール | 6.6 (167) |
| PRL-12 | レール | 12.5 (317) |
| PRL-24 | レール | 24.3 (617) |
| PRL-36 | レール | 36.5 (927) |
| PRC-1 (M-PRC-1) | キャリア | 1.0 (25.4) |
| PRC-3 (M-PRC-3) | キャリア | 3.5 (88.9) |
| PRX | 位置決めブロック | 0.5 (12.7) |

レールはインチ/ミリ仕様どちらのテーブルにもマウントできます



寸法 [in. (mm)]

| モデル | A | B |
|--------|---------------|--------------|
| PRL-24 | 24.28 (616.7) | 4.14 (105.2) |
| PRL-36 | 36.48 (926.6) | 7.24 (183.9) |

レール仕様

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 平面度標準値 [in. (μm)] | 0.002 (13)以上 1 ft (30 cm) |
| 真直度標準値 [in. (μm)] | 0.001 (25)以上 8インチ (20 cm) |



ミラーマウント

レンズホルダ

専用光学マウント

レーザシステム

メカニカルシャッタ

アクセサリ

ベース&ブラケット


ポスト&ロッドシステム

コンポーネントセット


フィルターマウント

実験キット
アプリケーション
キット


Model PRL-12

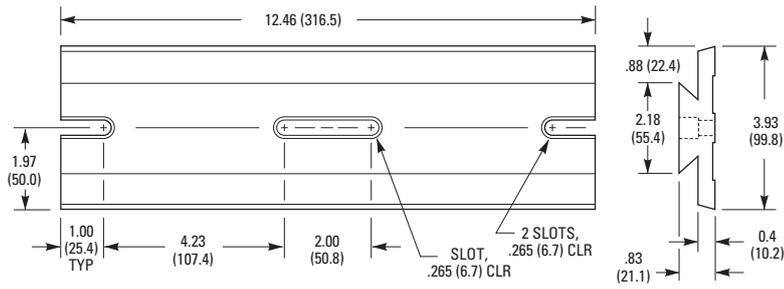


Model PRL-6

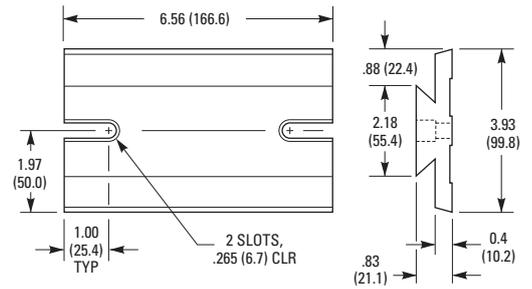


Model PRL-24, PRL-36

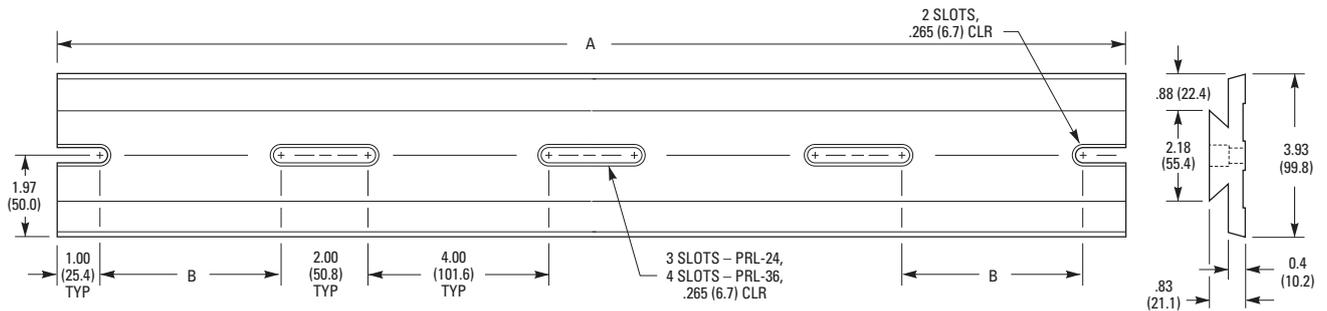


Model PRC-3

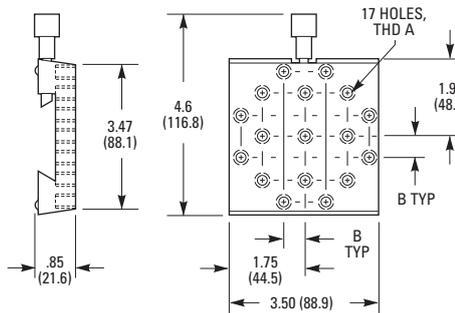

Model PRX

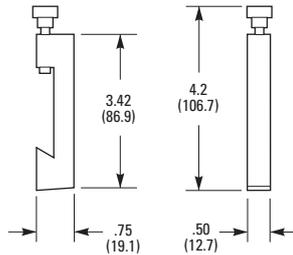

Model PRC-1

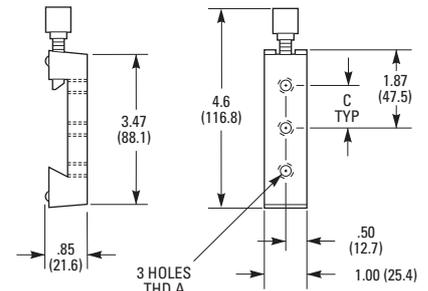

CAD CADファイルについては、
弊社までお問合せください。

| モデル (ミリ仕様) | ネジ規格 | | | 寸法 [in. (mm)] | | |
|---------------|--------|--------|--------|---------------|---|---|
| | A | B | C | A | B | C |
| PRC-1 | 1/4-20 | | 1.000 | | | |
| (M-PRC-1) | (M6) | | (25.0) | | | |
| PRC-3 | 1/4-20 | 0.500 | | | | |
| (M-PRC-3) | (M6) | (12.5) | | | | |