

76 mm Quick-Release 光学レールシステム

Quick-Release Optical Rail System

New Focus™
A Newport Company



- 片手で調整可能なQuick-Releaseロック機能付きレールキャリア
- 大きく読み取りやすい目盛り (ミリ/インチ表示)
- 便利なマウント穴

キャリアのロック解除が簡単でしかも非常に軽量となっています。レールは、箱型ビームクロスセクションを使い、硬性に影響もせず軽くなっています。キャリアは異なる3種類を用意しており、片手ロックと解除操作ができるバネ式レバーがあります。8-32 (M4) スクリューはキャリアを完全に固定することができます。レールはテーブルクランプで光学テーブルに取り付けるので、実際どんな位置でも固定も可能となります。

各レールはメートル単位とインチ単位の両目盛り付きです。

発注のご案内

モデル	内容	長さ	マウント方法
9741 (9741-M)	キャリア	1.0 (25.4)	1/4-20通し穴 (M6通し穴)
9742 (9742-M)	キャリア	3.0 (76.2)	1/4-20、8-32 (M6、M4)
9743 (9743-M)	キャリア	1.0 (25.4)	8-32 (M4)
9731	光学レール	12.0 (304.8)	テーブルクランプ
9732	光学レール	24.0 (609.6)	テーブルクランプ
9739	テーブルクランプ	0.63 (16.0)	1/4-20、M6スロット




モデル9743キャリアのQuick-releaseレバー




モデル9732はミリ単位とインチ単位の両目盛り付きです。

Model 9739

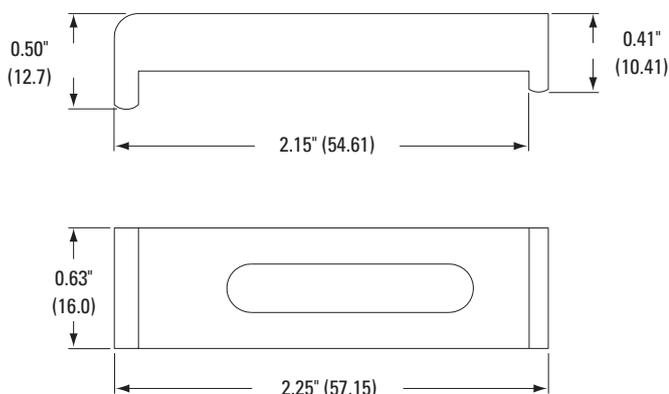

Model 9741 (-M)

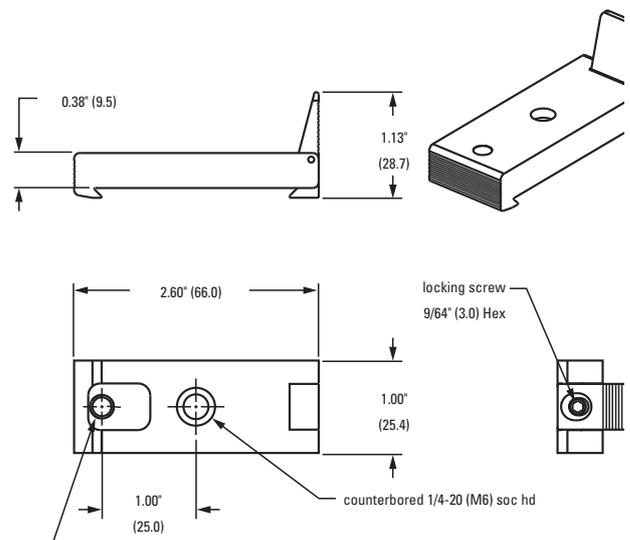

ミラーマウント

レンズホルダ

専用光学マウント

レーザシステム

メカニカルシャッタ

アクセサリ

ベース&ブラケット


ポスト&ロッドシステム

コンポーネントセット


フィルターマウント

実験キット
アプリケーション
キット


Model 9742(-M)

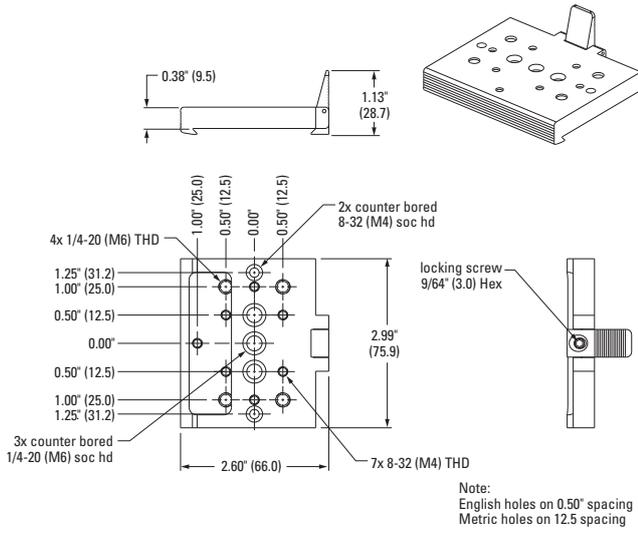

Model 9743(-M)

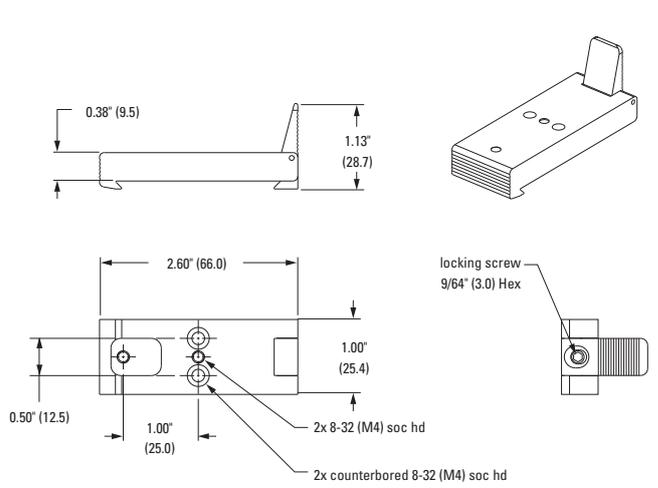

Model 973X (side view)

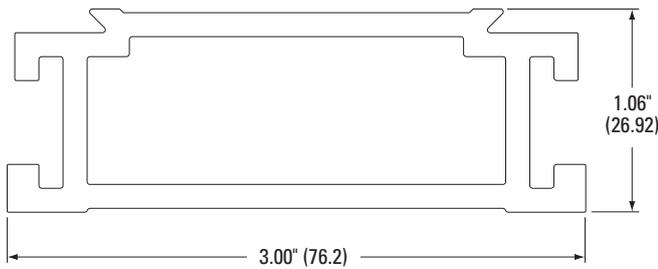

Model 973X (top view)

