

# 小型可変スリット

## Compact Adjustable Width Slit



ポストとポストホルダは別売です

- スリット幅を0.20インチ (5ミリ) まで調節可能
- 実際のスリット幅をマイクロメータで読み取り可能
- フェイスプレートとポスト取り付け穴付き
- 取り付けネジはインチ/ミリそれぞれをご用意しています

SV-0.5シリーズの小型可変スリットは、0.5インチ (12.7 mm) スルーホールを中心に対して対称に配置された2枚の刃をマイクロメータで精密に駆動します。スリット幅は0.20インチ (5 mm) まで動かすことができ、マイクロメータの値が実際のスリット幅に対応するように設計されています。マウントは非常にスリムに設計されており、フェイスプレートには4ヶ所に取り付けネジ穴が設けられているため、コンパクトなOEM光学系への組み込みに最適です。ユニットの底面に設けられた8-32 (M4) 取り付けネジ穴はNewportの標準タイプまたはペDESTALタイプのマウントポストに適合します。


### 発注のご案内

モデル (ミリ仕様)	マウント方法 (ネジのタイプ)	内容
SV-0.5 (M-SV-0.5)	8-32	可変スリット

### 仕様表

スリット最小幅	完全閉鎖
スリット最大幅	0.20 in. (5 mm)
感度	1 $\mu$ m

### SV-0.5シリーズ

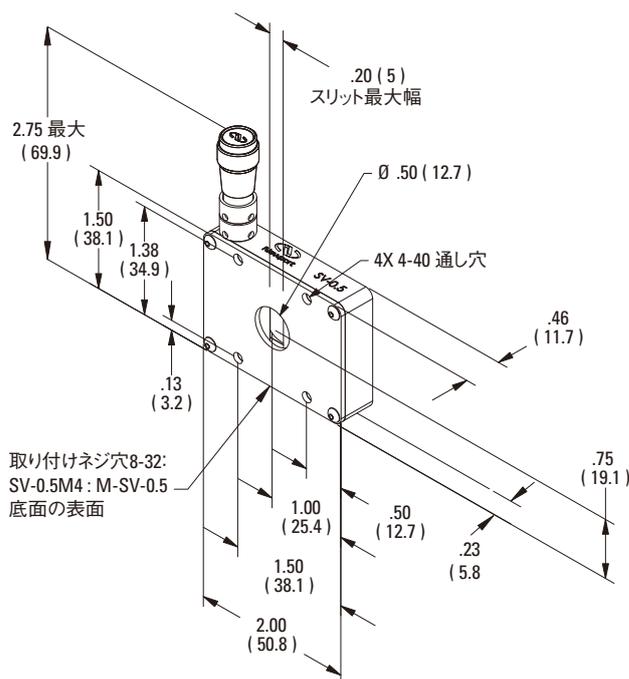

マウントポストに取り付けたSV-0.5 (裏面)

### 関連製品



固定幅スリット (P408を参照)



ペDESTALポストマウントオプション  
(P466参照)